


Water is Life!

CELSINE

医療用電解水生成器
セルシーヌ

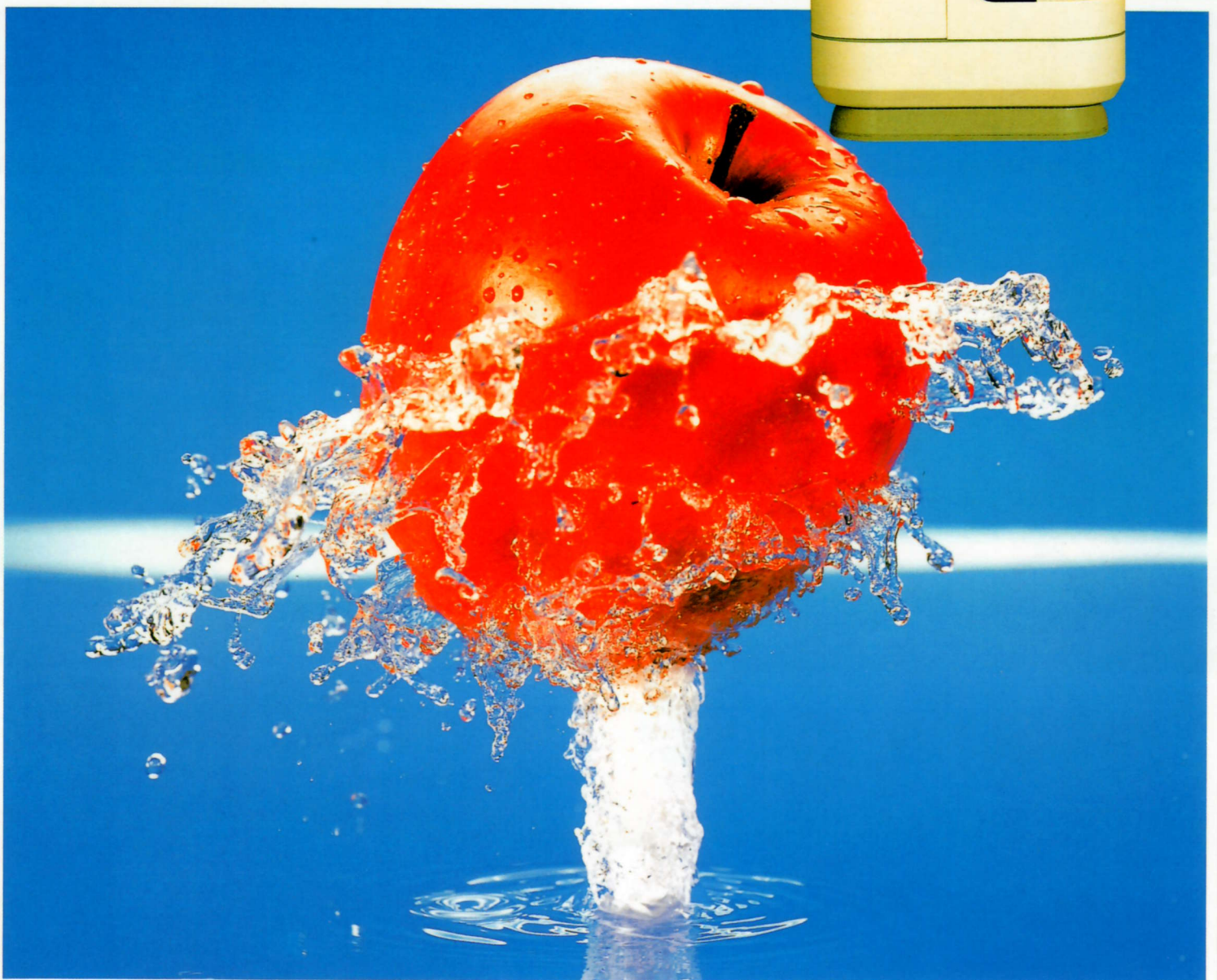

健康に優れた水

アルカリ性電解水

胃腸内の異常発酵
慢性下痢
消化不良
胃酸過多

▶ アルカリ性電解水の効能

胃腸内異常発酵、慢性下痢、消化不良、胃酸過多に効果があります。

▶ アルカリ性電解水の使い方

飲料水・製氷に。緑黄色野菜のゆがきに。
炊飯・煮物に。コーヒー・お茶・水割に。



弱酸性のアストリンゼント
効果にすぐれています。

酸性電解水の効能

弱酸性のアストリンゼント効果があります。

酸性電解水の使い方

洗顔後、入浴後の肌のひきしめに。
ヒゲ剃り後の肌のひきしめに。
天ぷらのころもに。めん類をゆでる際に。

酸性電解水

美容にいい水

アルカリ性電解水と酸性電解水。

体内の約70～80%を占める水分は、常に各臓器に吸収されるため健康と深い関わりを持っています。そのため、バランスよく健康な体を保持するためには、水分を補給してあげる事が必要とされます。

アルカリ性電解水は、消化不良、下痢、胃酸過多、胃腸内異常発酵に効果があります。

酸性電解水は主に外水用として、アストリンゼント効果があり、

暮らしの中でその力を発揮します。

この両方の水を、日常生活の中で必要な時に必要なだけ使用できる機器として、セルシーヌは生まれました。

Water is Life!

アルカリイオン水生成器《セルシーヌ》

充実機能で、

アルカリ性電解水と酸性電解水を！


- ①従来に比べアルカリ性電解水の取水量が2倍と増え、アルカリ性電解水も毎分約4.5ℓ生成されます。
- ②清潔さを保つ、完全自動化洗浄機能を装備、銀添粒状活性炭でろ過しますので、制菌力にも優れていて、飲料水としてもご利用いただけます。
- ③ご使用の水が、酸性電解水の場合、メロディで教えてくれますので目のご不自由な方にも、ご利用いただけます。
- ④PH機能(0～4の5段階)調節が付いていますので、お好みの水質をご自由にお選びいただけます。
- ⑤内部の残り水による細菌繁殖を防ぐために自動ドレイン機能が付き、内部に水が残らないようになっていますので、いつまでもご利用いただけます。
- ⑥取り付けも簡単で、水道口に直結できます。後は蛇口をひねるだけで電解水が手軽にご利用いただけます。また、水道水と電解水の切り替えもワンタッチで可能です。

《セルシーヌ》はご家庭の水道水を浄化して雑菌を除去し、電気分解によりアルカリ性電解水と酸性電解水を作り出す医療用電解水生成器です。

《セルシーヌ》は健康に良いアルカリ水と美容に優れた酸性水の水がワンタッチ操作で簡単にご利用いただけます。

《セルシーヌ》はコンパクトながらも機能充実。これからの生活は、ご家族皆様に“アルカリ性電解水”と“酸性電解水”を。

《セルシーヌ》でご活用ください。

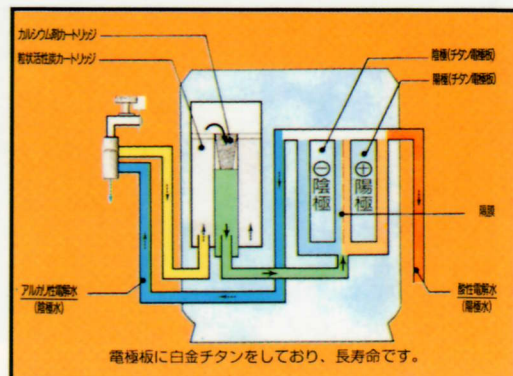

医療用電解水生成器(セルシーヌ)

医療用具承認番号 20900BZZ00897000

セルシーヌ独自のメリット

1

電極板は白金チタンを使用しています。

2

長時間(約1時間)の連続使用が可能です。(但し、水質及び使用条件によっては、これが適応されない地域もあります。)

3

塩素濃度2ppmの所で4人家族の場合(40ℓ/日)約1年間使用できます。しかも、流量センサーで使用水量を積算し取替時期を自動的に知らせます。

4

電解槽は通水使用ごとに自動洗浄されますので、自動洗浄の手間がいりません。

5

洗浄中に通水された場合でもリセットされ、洗浄水でなく電解水が摂取できます。

6

通水量表示ランプ“△”“標準”“▽”(多・適正・少)の表示により、現在通水量を表示し、適正なpH値でご利用いただく目安が表示されます。

7

電解質を多く含む水や、通水量・水質・水温により過電流が発生した場合、マイコン制御により過電流を防止します。

8

水圧の低いマンションの最高階や水道圧の低い地域でもご使用になれます。

CELSINE

セルシーヌ

標準小売価格 246,750 円 (税込)

取付工事費別途

交換用浄水カートリッジ(約1年間) 11,550 円 (税込)

- 給水仕様：吐水蛇口分岐式(Uターン方式)
- 給水接続：分岐水栓セット(オプション有)
- 電源電圧：AC100V/50Hz、60Hz
- 消費電力：約160W
- 本体：<寸法>幅240×高さ290×奥行き115(mm)
<重量>約5kg
- 構成：据置き・壁掛け兼用・浄水器内蔵
- 操作方法：押ボタンスイッチ(電解強度・酸/アルカリ切替え)
- 最高使用水温：約30度
- 使用水道圧範囲：0.7~6kgf/cm²(圧カスリーブ使用)
- 電解方式：連続式電解方式(流量センサー内蔵)
- 電解：<処理水量>4.5~5ℓ/min(原水)
<電解能力切換>5段階ダイレクト設定(0・1・2・3・4)
<電解槽>白金チタン電極
<電解洗浄>オートクリーニング方式(マイコン制御による全自動洗浄方式)(使用通水量に応じて洗浄する)
- 浄水器：<処理水量>標準使用状態を1日40ℓとして約1年間(原水残留塩素濃度2PPMに対し0.4PPMに達するまでの水量)
<寿命表示>流量積算により、14tで交換時期予告でLED点滅、積算15tでLED点灯する
<ろ過材料>銀添粒状活性炭(残留塩素・カルキ臭・有機化合物・臭い除去)
<交換方式>ワンタッチ交換システム
- 電源保護装置：ガラス管ヒューズ
- 過電流検出：設定レンジ自動切替
- 過昇温度保護装置：絶縁トランス温度センサー内蔵(自動復帰型)
 - ◎水道法基準に不適合な原水は処理できません。
 - ◎硬水を軟水に変えることはできません。
 - ◎地域によって塩素除去能力に多少の差があります。

(注)本電解水生成器は、ご家庭用を主体としたアルカリ性電解水及び酸性電解水であり、強力な殺菌効果(無農薬用殺菌用)を得る機器とは異なります。

【使用上のご注意】 *安全の為、必ずお守りください。

- 初めて飲まれる方は、最初のうち低濃度のアルカリイオン水を少量からお飲みください。
- 次のような方は医師または薬剤師に相談してください。
 - 医薬品をアルカリイオン水で飲用される方。
 - 無酸症の方や、病気治療中の方。
 - 持病のある方、または身体の弱っている方。
 - 肝臓・腎臓に障害のある方。
 - 医師または歯科医師の治療を受けている方。
- 次の方は酸性水(アストリンゼント)を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。
 - お肌の弱い方。
 - アレルギー体質の方。

2004.09

株式会社ワイズカンパニー
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-1-3-6F
045-953-1724
<http://www.water-life.jp/>