



# いのち みなもと 水は生命の源です

おいしいだけの水から

安全で健康 によい水へ!

家族を 守る「水」

それが電解還元水です

# Feliz Agua

フェリス・アクア

管理医療機器 連続式電解水生成器  
(コード：70623000)



管理医療機器 連続式電解水生成器 (コード：70623000)

## 基本仕様

型式	PC-200
品名	連続式電解水生成器 フェリス・アクア
給水仕様	吐水蛇口分岐式(Uターン方式)
給水接続	分岐水栓セット(オプション等)
定格電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	約200W
本体寸法	幅240×高さ290×奥行115(mm)
本体重量	約5kg
構成	据え置き・壁掛け兼用、浄水器内蔵
操作方法	押しボタン式 (電解強度・還元水/酸性水切り替え・酸性時メロディー)
最高使用水温	約40℃
使用水道圧範囲	0.1~0.5MPa(1.0~5.0kgf/cm <sup>2</sup> )
電解方式	連続式電解方式(流量センサー内蔵)
処理水量	4.5~5ℓ/min(原水)
電解能力切換	5段階設定(浄水・1・2・3・4)
電解槽	プラチナコーティングチタン電極
電解洗浄	オートクリーニング方式(マイコン制御による自動洗浄方式) (使用通水量に応じて洗浄する)
電源保護装置	ガラス管ヒューズ
過電流検出	電解能力自動切替
過昇温度保護装置	温度センサー内蔵

## 【浄水カートリッジ】

処理能力	流量積算で15t (原水残留塩素濃度2ppmに対し0.4ppmに達するまでの水量)
カートリッジ表示	流量積算により、14tで交換時期予告でLED点滅、 積算15tでLED点灯する。
ろ過材料	銀添活性炭
交換方式	カートリッジ交換
カルシウム添加	強制溶解型添加方式、添加筒内蔵

## 付属品



※その他付属品：取扱説明書・ビニールタイト・排水ホース固定用吸盤 ※オプション：壁掛用プレート

# Feliz Agua

本体価格  
**246,750円**

標準工事費……………15,750円  
浄水カートリッジ……………11,550円  
(流量15tで交換) ※価格はすべて税込

医療機器承認番号  
**21400BZZ00466000**

※本器は連続式電解水生成器として承認を受けています。



## 操作パネル

- 1 洗浄表示ランプ**  
電解槽の洗浄を点灯表示します。洗浄は通水後に自動的にを行い、終了後には消灯します。
- 2 還元水/酸性水表示ランプ**  
電解還元水、電解酸性水のご使用に合わせて点灯します。
- 3 流量表示ランプ**  
電解に適した通水量を表示します。
- 4 強弱切り替え表示ランプ**  
電解の強度を1~4の4段階まで選択できます。●浄水も選択できます。
- 5 メロディーランプ**  
点灯時、電解酸性水を使用するとメロディーが流れます。
- 6 休止ランプ**  
安全装置が働いた時に点灯します。
- 7 切り替えボタン**  
ご使用に合わせて、蛇口から出る水を還元水あるいは酸性水に切り替えることができます。
- 8 強弱切り替え設定ボタン**  
●電解の強度を1~4の4段階まで選択できます。●浄水も選択できます。
- 9 メロディーボタン**  
電解酸性水使用時に「メロディーを流す」または「流さない」を切り替えるボタンです。
- 10 カートリッジ交換警告ランプ**  
浄水器カートリッジの交換準備時期に点滅し、交換時期に点灯します。

- ご注意**
- 水道水の基準に不適な原水(井戸水、海水等)には使用できません。
  - 火を使用しているところ、凍結の恐れがあるところ、水のかけやすいところ、不安定な場所など、故障の原因となるような場所には設置しないでください。
  - 酸性水は、飲用水として使用しないでください。
  - 設置工事に関しては、メーカーまたは販売店にご相談ください。
  - 地域によって、塩素除去能力に多少の差があります。
  - 硬水を軟水に変えることはできません。
  - 電源プラグをコンセントから引き抜くときは、コードを持って引き抜くなどして無理な力をかけないでください。
  - 故障した場合は、すみやかに販売店にご連絡ください。
  - 改造等は、事故の原因となりますのでしないでください。
  - pH試験液で確認した水は使用しないでください。
  - お湯を過ぎないでください。故障の原因となります。
  - ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

発売元

●お問い合わせは当店へ

**株式会社 ワイズカンパニー**  
〒241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町  
2-1-3-6F  
TEL 045 (953) 1724  
FAX 045 (953) 1725

http://www.water-life.jp/

# 還元水は胃腸症状の改善に有効です！

フェリス・アクアは水道水から、健康に役立つ「還元水」を作る医療用機器です。

「還元水」とは、水を電気分解して生成される陰極側の水のことです。水の機能性をアップさせています。飲用すると胃腸症状※の改善に有効で、胃腸の働きを整えてくれます。また、食べ物本来の持つみずみずしさや、おいしさを引き出してくれます。

※胃腸症状とは…  
胃もたれ、胃重感、胃部不快、便通異常（軟便・硬便）、腹鳴、膨満感

医療機器承認番号 21400BZZ00466000



## 用途いろいろ

### 料理に

- (還元水・酸性水)
- 食材の洗浄に
  - みそ汁やスープに
  - 野菜の洗い、アク抜きに
  - ご飯の炊き水に
  - 緑黄色野菜のゆがきに
  - めん類の茹で水に
  - 天ぷらの衣作りに

### 飲む

- (還元水)
- 飲料水として
  - お茶・コーヒー・紅茶に
  - ウィスキー等の水割りに
  - 製氷に

### 美容に

- (酸性水)
- 手洗い、洗顔に
  - お肌のひきしめ、お手入れに
  - お風呂の浴用水として

### 電解還元水

胃腸症状の改善に有効

※胃腸症状とは…  
胃もたれ、胃重感、胃部不快、便通異常（軟便・硬便）、腹鳴、膨満感

### 電解酸性水

弱酸性だから、お肌を引きしめるアストリンゼントとして効果があります。

## 栄養補助水としての電解還元水

### ①カートリッジで不純物を除去、おいしい水に。

まず、水道水が電解槽に入る前に、水に含まれるカルキ臭やカビ臭を除去。同時に、抗菌性にすぐれた銀イオンが、カートリッジ内の雑菌繁殖を抑えるので、安心して飲めるおいしい水をつくります。

### ②浄水を高性能電解槽で電気分解。



用途に応じて4段階の機能水を、連続して生成します。

### ③還元電位 -250mV以上を実現。

すぐれた電解性能で、還元電位のきわめて高い還元水を生成。地域の水質差に影響されにくい、安定した還元水を供給できます。

### ●いろいろな水の電位比較

水の種類	電位 (mV)
水道水	+500~+750
天然水	+100~+200
フェリス・アクアの水	-250以上

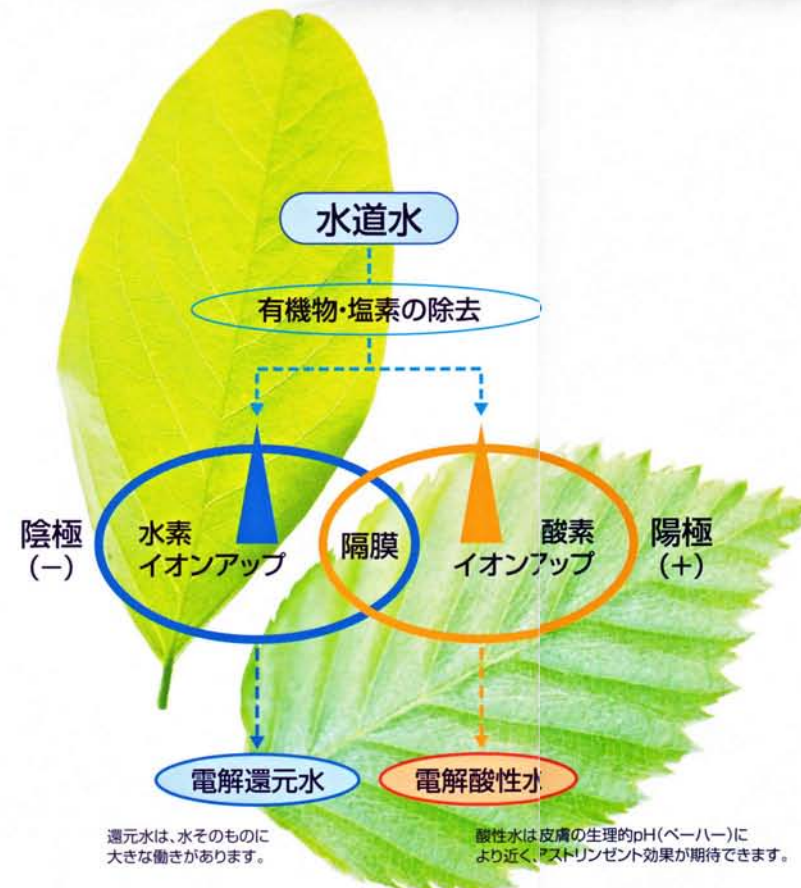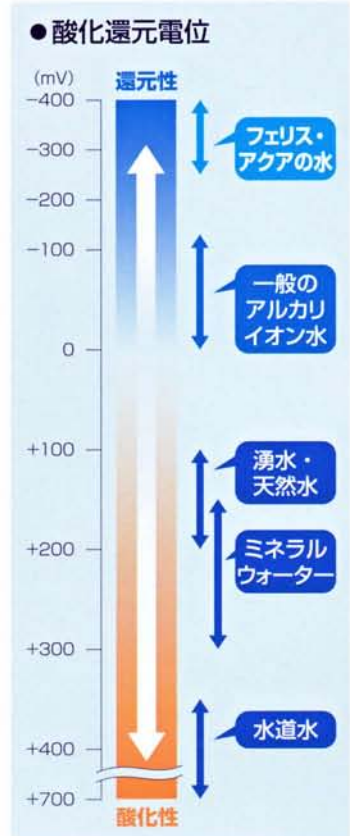

還元水は、水そのものに大きな働きがあります。酸性水は皮膚の生理的pH(ペーハー)に近く、アストリンゼント効果が期待できます。

## 連続式電解水生成器 Feliz Agua の特長

### 使いやすいコンパクト設計

蛇口から電解還元水を取り出す2ウェイ方式ですので設置場所を選ばず、コンパクトなので壁掛けも可能。

### 高性能電解槽

2室5枚の電解槽を採用。電極板にはチタンプラチナコーティング電極を採用して電解効率をよくなり、安定した電解水が得られます。

### 全自動洗浄機能

マイコン制御のオートクリーニング方式。使用通水時間に応じて洗浄します。電極板のスケール付着を防ぎ、電解能力の低下を防ぎます。

### 15t処理の浄水カートリッジ、交換のお知らせ

1日40ℓご使用で約1年間(15t)ご使用になれます。浄水カートリッジ交換時期は、14tでカートリッジランプの点滅、15tでランプが点灯してお知らせします。

### メロディー ON/OFF スイッチ

電解酸性水生成中はメロディーが鳴ります。気なる場合は消すことも可能です。

### その他安全対策機能

電解質の多い水質の地域では器械が過熱する場合がありますが、温度センサー内蔵で安心。また誘導性の雷が発生しても、本体の保護回路が作動する安全設計です。