


AQUA QUEEN

CRYSTAL

five water

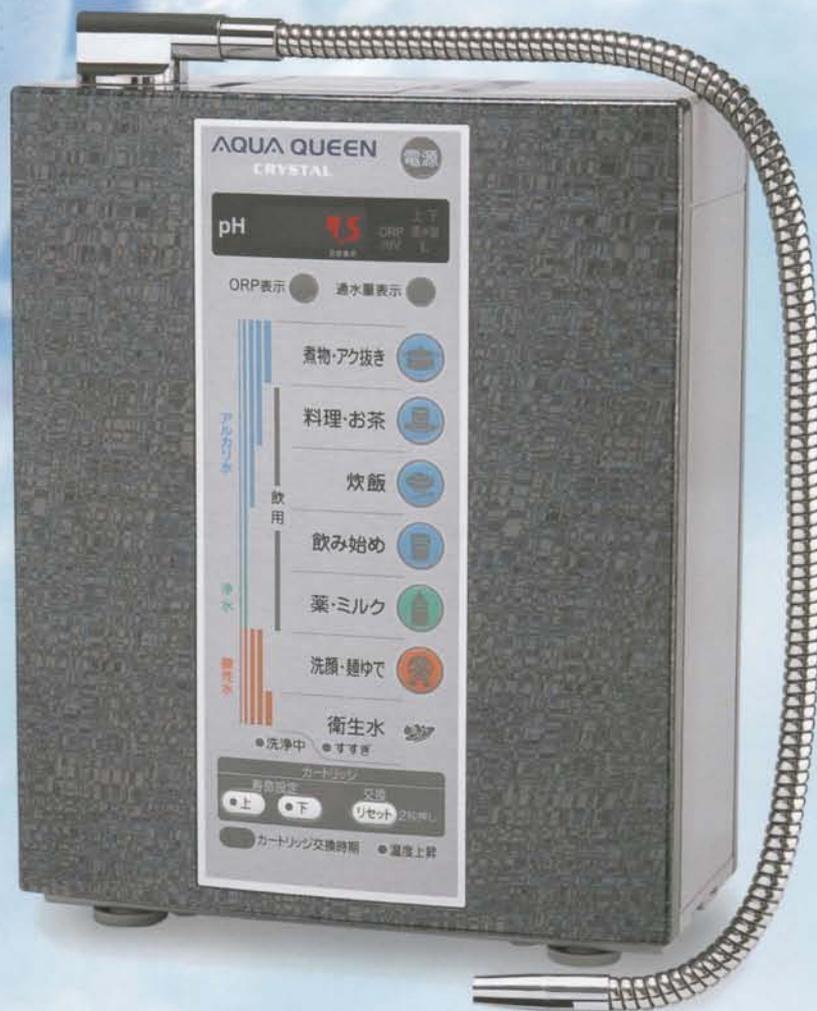

電解還元水生成器

アクアクイーン クリスタル

ファイブウォーター

・進・化・を・と・げ・た・

ダブル電解槽

ダブル洗浄

ダブルマイコン

ダブルカートリッジ

水素・酸素が持つポテンシャル
(還元力・酸化力)を意識した

アクアクイーン クリスタル


ファイブウォーター

制御系・電解系のダブルマイコン搭載。基盤トラブルの回避ができ長寿命。

2つのマイコン(マン・インターフェースマイコン、自立作業マイコン)でしっかり制御します。

PH
ORP
通水量
スイッチ

第1マイコン(制御系)

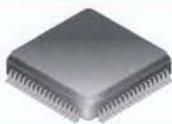

指示

報告

第2マイコン(電解系)



電解時の
電圧調整

ダブル電解槽で、よりカラダにいい水をたっぷり生成。 **業界最大クラス**

ダブル電解槽で実現した高い電解力と吐水量。すばやくたっぷり使えるから、ストレスなく野菜洗いからお米とぎ、麺ゆで、料理まで、幅広く活用頂けます。



©平成16年3月現在

ダブルカートリッジで浄水機能向上。しかも上下別々に交換が可能。

水に含まれるシマジン(農薬)は繊維状活性炭で、カルキ臭や総トリハロメタンは活性炭でしっかりキャッチ。ミネラル分はそのままで、クリーンな水をつくります。

標準カートリッジ



暮らしに役立つ水をお届けします

電解還元水

【アルカリイオン還元水】

効能・効果

消化不良・胃酸過多・制酸
慢性下痢・胃腸内異常発酵

酸性水

効能・効果

アストリンゼント効果
(収れん作用)

浄水

衛生水

設置幅9.8cmの スリムなボディ



システムキッチン
の水切り機にも置
ける奥行き12cm
の薄型設計。
しかも設置部の
奥行きはわずか
9.8cm。場所をと
らず、さまざまなキ
ッチンにすっきりと取
まります。

見やすく、使いやすい操作パネル

ひと目でわかる、デジタル表示。

pH値が、見える。
通水すると、選んだ水のpH設定値をデジタル表示します。
pH 9.5 (目安)

酸化還元電位が、見える。
ORPボタンを押すと、酸化還元電位の目安値が確認できます。
pH 1150 (衛生水生成時(目安))

水の使用量が、見える。
通水量ボタンを押すと、使用した水の量が確認できます。
pH 16000 (目安)

ひと目でわかる、光る大型ボタン。

生活シーンに合わせてボタンを押すだけの簡単設計

各種料理や炊飯、飲料水に、または薬の服用、洗顔、除菌など、さまざまな用途に最適の水が、ボタンひとつで選べます。

目で見てはっきり確認。安心の光るボタン。

選んだ水のボタンを押すと、飲める水はグリーンに、飲めない水はオレンジ色に点灯するので操作も安心です。さらに、飲めない水の時はブザー音でもお知らせする親切設計です。

飲める水

飲めない水

浄水時の「むだ水」をカットする うれしい節水機能

浄水時の排水カット機能を搭載。むだな水道料金を抑え、ランニングコストの低減につながります。

清潔な暮らしを保つ、 たっぷりの衛生水

業界最大クラス
最大5L
生成

洗浄・除菌に便利な衛生水が、1回の操作(食塩添加筒に食塩を入れ、レバーを切り替えるだけ)で5L(最大)作れます。まな板やふきんのつけおき洗いなど、清潔さが気になる場所にうれしい機能です。

食塩投入量(g)	衛生水生成量(L)
5	約1
10	2~3
15	4~5(最大)



食塩添加筒に食塩を入れる



レバーを切り替える



蛇口をひねる。生成中、ランプが点滅してお知らせ。

衛生水。毎日の暮らしで、こんな時に……

- 手洗いに
- 足のお手入れに
- ふき掃除に
- まな板の洗浄に
- ふきんの洗浄に
- ペットの消臭に


新ダブルクリーニング方式による 長寿命設計

長期間にわたって高品質な電解還元水をお使いいただくために、2パターンの洗浄機能を搭載しています。

STEP1 リアルタイムリフレッシュ機能 (特許出願中)

電極板の極性を瞬時に入れ替え、電極へのカルシウムの付着を減らす独自の方式により、電極板の寿命を伸ばし、安定した電解能力を保ちます。

リアルタイムリフレッシュ機能イメージ図

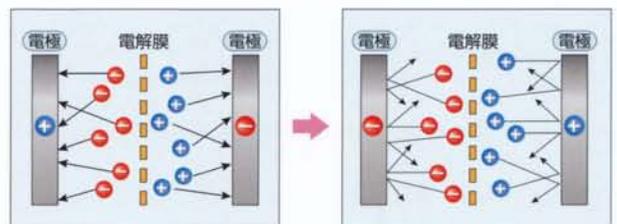

電解還元水生成中に、1/50秒の早さで極性を入れ替えることで電極板に付着しようとするミネラル分を瞬時に弾き飛ばし、電極板を守ります。

STEP2 オフタイムオートリフレッシュ機能

毎回使い終わった後、電解槽に水をためて電極板を約10秒間しっかり自動洗浄します。

■電解還元水生成器 アクアQueen クリスタル 仕様

品番	FW-207 (J)		
定格	AC100V 50/60Hz 2.9A		
給水方式	吐水蛇口分岐栓		
給水接続	レバー切替		
構成	浄水器 本体内蔵型		
消費電力	250W		
本体	質量	約6.6kg (満水時)	
	寸法	幅 約255mm×奥行 約120mm×高さ 約360mm	
最高使用水温	35℃		
使用可能水道圧	約70~750kPa (0.7~7.5kgf/cm ²)		
最大生成量 400kPa(4kgf/cm ²) 時	還元水	約5.5L/分	
	衛生水	約1.2L/分	
	浄水	約6.0L/分	
連続使用可能時間	電解還元水	約30分	酸性水: 約10分
	強アルカリ水	約10分	衛生水: 最大約5分 (食塩15g投入時)
カートリッジ	シマジン (農薬) の過能力	約16,000L (上カートリッジFW-02S) 原水シマジン濃度0.003mg/Lとし、ろ過水濃度が0.0006mg/Lに達するまで	
	残留塩素の過能力	約16,000L (下カートリッジFW-03N) 原水残留塩素濃度2mg/Lとし、ろ過水濃度が0.4mg/Lに達するまで	
	総トリハロメタンの過能力	約3,000L (下カートリッジFW-03N) 原水総トリハロメタン濃度0.1mg/Lとし、ろ過水濃度が0.02mg/Lに達するまで	
	溶解性鉛の過能力	約16,000L (下カートリッジFW-03N) 原水鉛濃度0.05mg/Lとし、ろ過水濃度が0.01mg/Lに達するまで	
	交換の目安 寿命設定「16,000」Lの場合	FW-02S・FW-03N: 約12ヶ月 (1日の使用量40L)	
	除去性能	可能	残留塩素 (カルキ)、赤さび、溶解性鉛、シマジン (農薬)、総トリハロメタンなどの溶存有機物
	不可能	水に溶解している塩分 (海水) や鉄分・重金属類	
電源コードの長さ	2.5m		
安全装置	サーマルプロテクター	: 110℃作動	
	温度ヒューズ (トランスに内蔵)	: 133℃以上で溶断	
医療用具製造承認番号	21600BZZ00158000号		



本体

希望小売価格 312,900円
(税抜価格298,000円)

- 主な付属品
- ・上下カートリッジセット
- ・マルチ分岐栓
- ・マルチ分岐栓取付け用付属品
- ・食塩 (衛生水生成補助剤)
- ・pH測定液セット
- ・グリセロリン酸カルシウム・スプーン




上下カートリッジセット

希望小売価格 14,175円
(税抜価格13,500円)

アクアQueen クリスタル 専用カートリッジ

交換時には、上下どちらか交換時期がきた方だけを交換できるため、ランニングコストを抑えることができます。

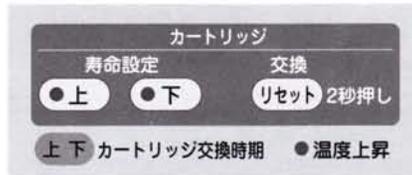

操作パネルのランプ表示で、交換時期をお知らせします。

●アクアQueen クリスタル 専用上下カートリッジセット

標準	ろ材	型式	希望小売価格 (税抜価格)
	中空糸膜+活性炭	FW-01CN (FW-02S+FW-03N)	14,175円 (13,500円)

●アクアQueen クリスタル 専用交換カートリッジ

カートリッジ交換時は、上カートリッジが中空糸膜タイプ「FW-02C」か繊維状活性炭「FW-02S」の2種類から選べます。

標準	メインろ材	型式	希望小売価格 (税抜価格)	浄水能力				交換時期の目安 ^{※4}
				遊離残留塩素 ^{※1}	濁り ^{※2}	溶解性鉛 ^{※3}	総トリハロメタン ^{※3} (CAT農薬) ^{※1}	
標準	上 繊維状活性炭	FW-02S	7,875円 (7,500円)	—	—	—	—	約1年 (40L/日使用時)
	下 活性炭	FW-03N	7,875円 (7,500円)	16,000L	—	16,000L	3,000L	
オプション	上 中空糸膜	FW-02C	7,875円 (7,500円)	—	16,000L	—	—	

カートリッジ寿命 (交換時期) は使用水量・水質水圧により大幅に短くなることがあります。

(ろ過能力に関係なく、濁りなどの微粒子により中空糸膜が目詰まりを起こし、早期にろ過性能が低下して吐出量が短くなることがあります。)

- ※1 家庭用浄水器試験方法 (JIS S3201) に準拠した試験で除去率80%の値
- ※2 家庭用浄水器試験方法 (JIS S3201) に準拠した試験でろ過量50%の値
- ※3 総トリハロメタンとは、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ブロホルムの4種類の化合物の総称です。
- ※4 カートリッジの寿命設定が総トリハロメタンの時は、40L/日使用で約2.5ヶ月になります

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ◆電解還元水を飲用するときは、次のことに注意してください。
 - ◇医薬品を電解還元水で飲用しないでください。
 - ◇無酸症の方は、電解還元水を飲用しないでください。
 - ◇飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が認められない場合には、医師または、薬剤師に相談してください。
- ◆次のような方は使用前に医師または、薬剤師に相談してください。
 - ◇持病のある方、または、体力が弱っている方
 - ◇肝臓・腎臓に障害のある方
 - ◇医師または、歯科医師の治療を受けている方
- ◆次の方は酸性水 (アストリンゼント) を使用する前に医師または、薬剤師に相談してください。
 - ◇前の弱い方
 - ◇アレルギー体質の方
- ◆本カタログ掲載商品は、日本国内でご利用ください。
- ◆はじめに飲用される方は、pHが中性に近い水を少量ずつ (コップ1~2杯) 2週間程度飲用し、その後、体調に応じてpH・飲用量を調節して飲んでください。
- ◆元止め式瞬間湯沸器には使わないでください。

ご使用上の注意

- ◆水道法の水質基準に不適な原水は、処理できません。
- ◆硬水を軟水に変えることはできません。
- ◆地域によって塩素除去能力の寿命に多少の差があります。

ご購入の前に

- ◆商品改良のため、仕様・外觀・部品は予告無く変更することがありますのでご了承ください。
- ◆印刷物と実物では多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◆このカタログの掲載商品の詳細につきましては、販売店または、当社にお尋ねください。

ご使用にあたって

この商品には、保証書が添付されています。保証書は、販売店で所定事項を記入の上発行しますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

株式会社 ワイズカンパニー
〒241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町
2-1-3-6F
TEL 045 (953) 1724
FAX 045 (953) 1725
<http://www.water-life.jp/>